

お客様各位

平素はエルメックス商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

2018年9月


ELMEX Post は、微生物検査ご担当者様宛に、弊社商品の発売や仕様変更、セミナー・学会・展示会、その他関連する情報を提供する目的で発信しています。本紙が適切でない部署に配信されている場合は、適切な部署へ転送下さいます様よろしくお願い申し上げます。

バイオスワブ CS-50,CS-60C, 豚検出用拭き取り検査キット PFB-01 販売開始 (2018年10月1日より)


この度エルメックスでは、環境検査のバイオフィルム採取に特化した拭き取り検査キット、および、豚成分の検出を目的とした拭き取り検査キット(ハラール認証取得済み)の販売開始いたします。それぞれの目的に合わせてご利用ください。

バイオスワブ CS-50、CS-60C

バイオフィルム採取用

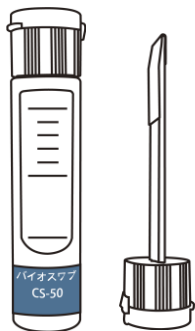

掻き取り時に 300g 荷重が可能
拭き取り部にマイクロファイバーを
使用し、高い採取性能があります
分注機能付き γ 線滅菌済み

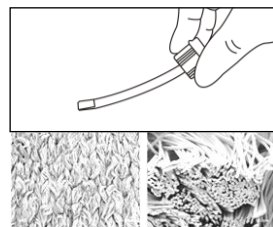

マイクロファイバー 繊維径 2 μ m

容器の蓋と一体型スワブで
バイオフィルムを掻き取り採取できます

商品名	バイオスワブ	バイオスワブ クリーンルーム仕様(クラス 100)
コード No.	CS-50	CS-60C
価格	¥ 3,000	¥ 50,000
入数	10 キット/箱	100 キット/箱
内容液	りん酸緩衝液 3mL	
材質	拭き取り部: PET (マイクロファイバー) 軸: ポリプロピレン キャップ: ポリプロピレン ボトル: ポリエチレン	


製造元: 株式会社アクティス

豚検出用拭き取り検査キット PFB-01

ハラール認証取得済み



サンプル採取用のバイオスワブ(PS-10)と、
豚血液・脂検出用イムノクロマトキットがセットになっています
検出対象: ブタ血清アルブミン 検出感度: 1ppm

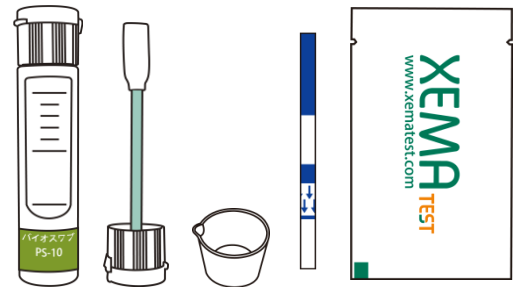

包丁・まな板等の調理器具をその場で判定

使用方法

- ①バイオスワブで拭き取り容器に戻してサンプル水を作ります。
- ②サンプル水を容器に移し試験ストリップを浸漬します。
- ③約 10 分間静置し、結果を判定します。

商品名	豚検出用拭き取り検査キット
コード No.	PFB-01
価格	¥ 14,000
入数	10 キット/箱
内容物	・バイオスワブ PS-10 (純水 2.5mL 含) ・XEMAtest 試験ストリップ ・試験ストリップ浸漬用容器 ・取扱説明書

製造元: 株式会社アクティス

----- サンプル要求書 FAX : 03-5261-4130 -----

御社名	ホームページアドレス http://	サンプル希望 <input type="checkbox"/> バイオスワブ CS-50 <input type="checkbox"/> 豚検出用 PFB-01 <input type="checkbox"/> カタログ希望 エルメックス商品仕入先 (業者名)
〒 ご住所	都道 府県	
ご所属	TEL	
役職	FAX	
ご芳名	e-mail	

株式会社エルメックスでは、当サービスをご登録頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事があります。

(1)キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2)統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析。(3)その他、あらかじめご同意頂いた目的。

配信停止をご希望の場合は、受信された FAX 番号を上記 FAX 欄にご記入の上、ご返信下さいます様よろしくお願い申し上げます。