

## お客様各位

平素はエルメックス商品をご愛顧賜り誠にありがとうございます。

ELMEX Post は、微生物検査ご担当者様宛に、弊社商品の発売や仕様変更、セミナー・学会・展示会、その他関連する情報を提供する目的で発行しています。本紙が適切でない部署に配信されている場合は、適切な部署へ転送下さいます様よろしくお願い申し上げます。

2023年1月中旬

微生物検査用フィルム培地

新発売

## Easy Plate™ YM-R 真菌(カビ・酵母)数測定用

キッコマンバイオケミファ社製

微生物検査用フィルム培地 Easy Plate YM-R 真菌(カビ・酵母)数測定用が発売となります。ぜひご利用ください。



## ● 48時間で測定可能

寒天培地より短時間で測定が可能。コロニーが発色するので残渣との判別が容易です。  
カウント作業も楽に。

## ● 判定


コロニーは紫色に発色  
カビ：大きく広がり周囲が明瞭でないコロニー  
酵母：明瞭な真円に近いコロニー

## ● 操作が簡単

カバーフィルムをめくり試料液 1mL を滴下し  
てとじるだけ。

## ● 省スペース・廃棄量の削減

10枚程度重ねて作業でき省スペース。培養スペースもシャーレと比べて約20分の1以下。  
使用後の廃棄物量も削減できます。

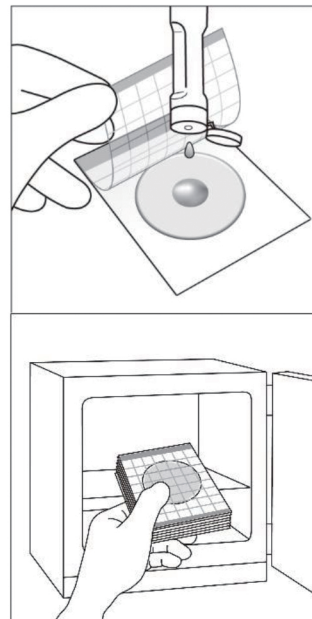

品名	コード No.	入数	価格	用途	培養温度	培養時間
Easy Plate YM-R	EPYMR-500	500枚	¥70,000	真菌(カビ・酵母)数 測定用	25℃±1℃	48±2時間
	EPYMR-100	100枚	¥17,500			発色が不明瞭な場合は24時間の追加培養
	EPYMR-50	50枚	¥10,000			

◆冷蔵保存(2~8℃)してください。価格は税抜価格です。 ◆Easy Plateのご用命はエルメックス販売店へお願いいたします。

コロニーカウントは Easy Plate 対応のスマートアイザックで省力化!



Easy Plate YM-R は現時点では対応しておりません(開発中) 詳細はお問い合わせ下さい

--サンプル・カタログ・デモ 要求書 Fax: 03-5261-4130 ---

送付先をご記入ください		お気軽にお問合せください	
御社名	e-mail	サンプル希望 <input checked="" type="checkbox"/> を入れてください	
〒 ご住所	都道 府県	<input type="checkbox"/> Easy Plate YM-R <input type="checkbox"/> Easy Plate AC <input type="checkbox"/> Easy Plate CC <input type="checkbox"/> Easy Plate EC <input type="checkbox"/> Easy Plate SA <input type="checkbox"/> カタログ希望 <input type="checkbox"/> Smart iSac デモ希望	
ご担当者名	TEL		
ユーザー様名	エルメックス商品仕入れ先(業者名)		

株式会社エルメックスでは、当サービスをご登録頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事があります。

(1)キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2)統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析。(3)その他、あらかじめご同意頂いた目的。

配信停止をご希望の場合は、受信されたFAX番号を上記FAX欄にご記入の上、ご返信下さいます様よろしくお願い申し上げます。